

# Tubifast™

**NIEUW** 2-WAY STRETCH™



## Lichtgewicht buisverband

De nieuwe Tubifast 2-Way Stretch is het eerste lichtgewicht, elastische buisverband dat zowel in de breedte als in de lengte meerekt.<sup>1</sup> Deze unieke eigenschap biedt volledige bewegingsvrijheid en extra draagcomfort. Ideaal voor verbandfixatie en huidbedekking. Het kan eveneens worden gebruikt als bedekking van dermatologische aandoeningen en als onderlaag voor gipsverbanden. Tubifast 2-Way Stretch houdt verband stevig op zijn plaats en maakt tape, verbandklemmen of knopen overbodig. Het is snel en eenvoudig aan te brengen en rafelt minder snel<sup>2</sup> dan traditionele buisverbanden.

Tubifast 2-Way Stretch houdt verband stevig op zijn plaats, knelt niet en geeft een gelijkmatige druk. Een hele geruststelling.

Buisvormig - klemmen of tape overbodig.

Snel en eenvoudig aan te brengen: op maat knippen en aanbrengen over het verband; sluit goed aan zonder af te knellen.


Dankzij de snelle en eenvoudige manier van aanbrengen, is het risico op kruisbesmetting beperkt.

Omdat het minder snel rafelt, is de kans klein dat vezels in de wond terechtkomen.<sup>2</sup>

Verkrijgbaar in verschillende lengtematen en daardoor kostenbesparend door minder afvalmateriaal.

Tubifast 2-Way Stretch is geschikt voor alle ledematen en is verkrijgbaar in 5 kleur-gecodeerde breedtematen.

Tubifast 2-Way Stretch is licht elastisch. Door de rek in twee richtingen biedt het buisverband complete bewegingsvrijheid met extra draagcomfort.<sup>1</sup>

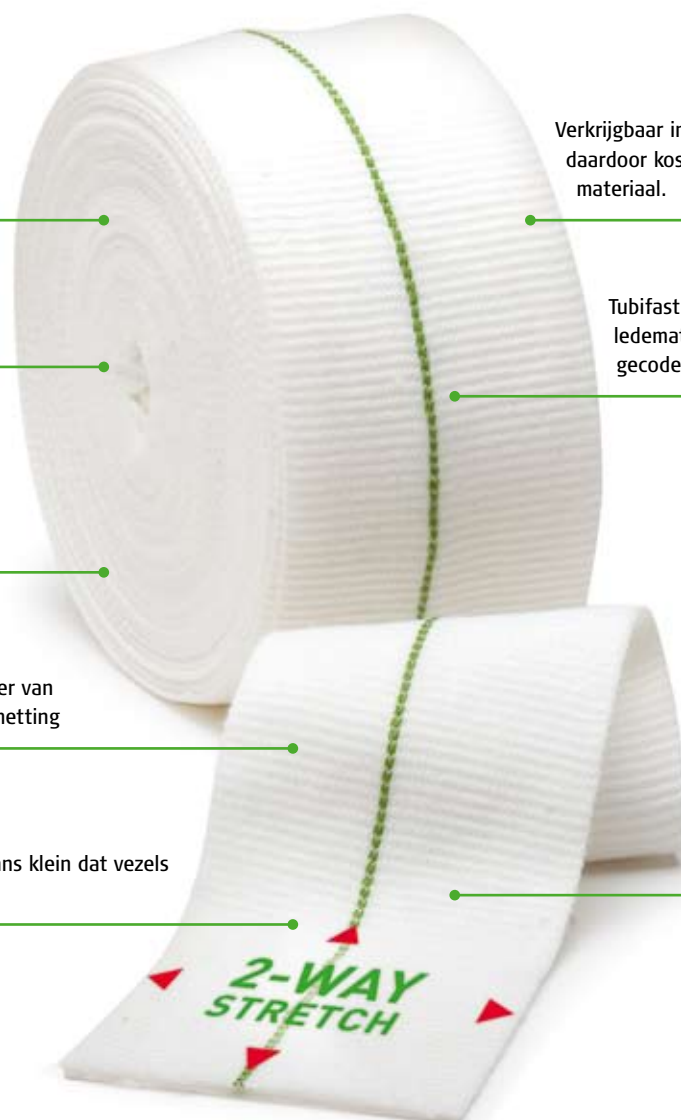

## Hoe werkt Tubifast 2-Way Stretch?


- De nieuwe Tubifast 2-Way Stretch is een buisverband van viscose dat is rondgeweven met zeer fijne elasthanraden voor lichte elasticiteit.
- Tubifast 2-Way Stretch houdt verband met een gelijkmatige druk stevig op zijn plaats zonder te knellen. Verbandklemmen en tape zijn overbodig. Door de rek in twee richtingen biedt het buisverband volledige bewegingsvrijheid en extra draagcomfort.
- Tubifast 2-Way Stretch is verkrijgbaar in vijf breedtematen en is geschikt voor alle ledematen, ongeacht de vorm of grootte.
- De maten zijn te herkennen aan een gekleurde lijn die in het

verband is geweven. Snel en eenvoudig aan te brengen: op maat knippen en aanbrengen over het verband; sluit goed aan zonder af te knellen.

## Toepassingsgebieden

- Tubifast 2-Way Stretch kan worden gebruikt voor verbandfixatie en huidbedekking. Het kan eveneens worden gebruikt voor het bedekken van dermatologische aandoeningen en als onderlaag voor gipsverbanden.
- Dankzij de buisvorm is Tubifast 2-Way Stretch met name geschikt voor het fixeren van wondverbanden op moeilijke plaatsen zoals de stomp als gevolg van een amputatie.


## Tubifast 2-Way Stretch aanbrengen

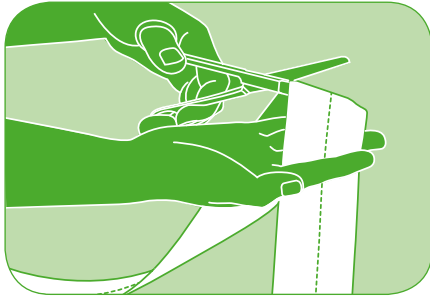

1. Kies de juiste breedte aan de hand van de kleurcodes en knip het verband op de juiste lengte.



2. Breng Tubifast 2-Way Stretch aan over de betreffende ledemaat.

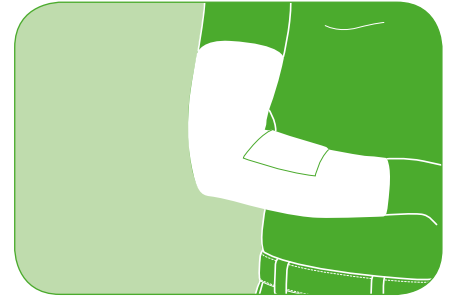

3. Zorg dat Tubifast 2-Way Stretch het wondverband bedekt.

## Bestelinformatie voor Tubifast 2-Way Stretch

Art. nr.	REF. nr.	Breedte x lengte	Ledemaat	Inhoud verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nr verpakking	ZI-nr per stuk	ZI-memocode
<b>Rood</b>								
9052480	2480	3,5 cm x 1 m	9 - 18 cm	12 st à 1 m	12 x 12 st	15383318	15414507	TUBIX1
9052434	2434	3,5 cm x 10 m	9 - 18 cm	1 rol à 10 m	48 x 1 st		15383393	TUBIX1
<b>Groen</b>								
9052481	2481	5 cm x 1 m	14 - 24 cm	12 st à 1 m	12 x 12 st	15383326	15414485	TUBIX1
9052436	2436	5 cm x 10 m	14 - 24 m	1 rol à 10 m	42 x 1 st		15383407	TUBIX1
<b>Blauw</b>								
9052482	2482	7,5 cm x 1 m	24 - 40 cm	12 st à 1 m	8 x 12 st	15383334	15414469	TUBIX1
9052438	2438	7,5 cm x 10 m	24 - 40 cm	1 rol à 10 m	30 x 1 st		15383423	TUBIX1
<b>Geel</b>								
9052483	2483	10,75 cm x 1 m	35 - 64 cm	12 st à 1 m	8 x 12 st	15383342	15414477	TUBIX1
9052440	2440	10,75 cm x 10 m	35 - 64 cm	1 rol à 10 m	18 x 1 st		15383431	TUBIX1
<b>Paars</b>								
9052479	2479	25 cm x 1 m	64 - 130 cm	12 st à 1 m	6 x 12 st	15383369	15414493	TUBIX1
9052444	2444	25 cm x 10 m	64 - 130 cm	1 rol à 10 m	20 x 1 st		15383458	TUBIX1

## Voordelen van Tubifast 2-Way Stretch

- Tubifast 2-Way Stretch houdt verband met een gelijkmatige druk stevig op zijn plaats zonder te knellen
- Door de rek in twee richtingen biedt het buisverband complete bewegingsvrijheid met extra draagcomfort<sup>1</sup>
- Verkrijgbaar in verschillende lengtematen, en daardoor kostenbesparend door afvalvermindering
- Snel en eenvoudig aan te brengen:

op maat knippen en aanbrengen over het verband; sluit goed aan zonder af te knellen

- Verkrijgbaar in verschillende breedtematen (variërend van kleine ledematen tot een volwassen bovenlichaam) die dankzij kleurcodes makkelijk te onderscheiden zijn.
- Omdat het minder snel rafelt, is de kans dat vezels in de wond terechtkomen, beperkt<sup>2</sup>

**Materiaal:** viscose, elasthan en polyamide.

**Wasvoorschriften:** 

<sup>1</sup> Gepubliceerde gegevens tonen aan dat Tubifast 2-Way Stretch ruim voldoet aan de minimumeisen die worden gesteld aan de elasticiteit in de lengte om te kunnen zitten, buigen en strekken. Fysieke textieltesten, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.

<sup>2</sup> Verzamelde gegevens.

Tubifast 2-Way Stretch en de verpakking daarvan bevatten geen natuurrubberlatex.

